

ORDOLINE  
Instructies voor Uitneembare  
Orthodontische Aligners



## 1 GEBRUIKSAANBEVELINGEN

VOOR DE BESTE RESULTATEN IS HET CRUCIAAL OM DE ORDOLINE-ALIGNERS 24/7 TE DRAGEN, MET EEN OPTIMALE DRAAGTIJD VAN 22 UUR.


**VERMIJD BIJTEN** TERWIJL JE DE ALIGNERS INBRENGT.

LAAT ZE GOED AANSLUI TEN EN DRUK ZE OVER DE TANDEN.

**HET IS NIET AANBEVOLEN OM TANDVULLINGEN TE LATEN DOEN NA AANVANG VAN DE BEHANDELING, OMDAT DIT DE PLAATSING VAN DE ALIGNERS KAN BEÏNVLOEDEN.**

\*INFORMEER JE ORTHODONTIST IN GEVAL VAN EEN DRINGENDE THERAPEUTISCHE BEHANDELING.

**BEGIN MET HET PLAATSEN** VAN DE ALIGNERS OP DE VOORTANDEN.

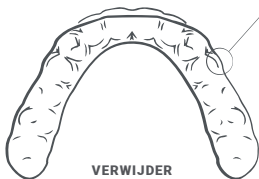

**VERWIJDER** DE ALIGNERS VAN DE ACHTERSTE KIEZEN.



**BEGIN MET HET PLAATSEN** VAN DE ALIGNERS OP DE VOORTANDEN.

**VERWISSEL DE ALIGNERSETS ELKE TIEN DAGEN, TENZIJ ANDERS VOORGESCHREVEN DOOR JE ARTS.**

WE RADEN AAN DE OUDE ALIGNERS IN EEN ZAKJE TE BEWAREN, DE DATUM VAN PLAATSING TE NOTEREN EN ZE MEE TE NEMEN NAAR JE VOLGENDE AFSpraak MET DE BEHANDELENDE TANDARTS.

WANNEER JE EEN NIEUWE SET ALIGNERS GEBRUIKT, KUN JE LAST HEBBEN VAN GEVOELIGE TANDEN EN ONGEMAK.

HET IS BELANGRIJK OM TE CONTROLEREN OF ER TIJDELIJKE ATTACHMENTS VAN DE TANDEN ZIJN LOSGEKOMEN. ALS ER UITSPARINGEN OP DE ALIGNERS ZITTEN, HOREN DIE OOK OP DE TANDEN AANWEZIG TE ZIJN.

RAADPLEEG JE TANDARTS ALS JE ZIET DAT EEN ATTACHMENT IS LOSGELATEN.

## 2 TIJDENS DE BEHANDELING

**HET IS VERBODEN OM TE ETEN MET DE ALIGNERS.** JE MAG ALLEEN KOEL WATER DRINKEN.

**DRINK GEEN HETE DRANKEN EN WAS DE ALIGNERS NIET ONDER HEET WATER,** WANT DAARDOOR KUNNEN ZE VAN VORM VERANDEREN.

KAUW GEEN KAUGWOM TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE ALIGNERS.

HET IS NIET AAN TE RADEN OM TE ROKEN MET DE ALIGNERS, WANT DAARDOOR KAN DE KLEUR EN ELASTICITEIT VERANDEREN.

## 3 MONDVERZORGING



**POETS JE TANDEN ZOALS GEWOONLIJK MET EEN TANDENBORSTEL EN TANDPASTA.** GEBRUIK FLOSDRAAD VOOR EEN GRONDIGE REINIGING.



**HET IS AAN TE RADEN OM NA MAALTIJDEN EN SNACKS JE TANDEN TE POETS** MET EEN TANDENBORSTEL EN TANDPASTA. ALS DAT NIET MOGELIJK IS, KUN JE KAUGWOM GEBRUIKEN, SPOELN MET WATER OF EEN SPOELVLOEISTOF GEBRUIKEN.



TIJDENS DE EERSTE WEKEN VAN DE BEHANDELING KAN HET **SLIJMVLIES GEVOELIG** EN BRANDERIG WORDEN DOOR DE ATTACHMENTS OP DE TANDEN. IN ZULKE GEVALLEN KUN JE HET **SPOELN MET EEN LAUWE ZOUTOPLOSSING** (EEN THEELEPEL ZOUT IN EEN GLAS WATER) OF EEN **ZWAKKE ANTISEPTISCHE VLOEISTOF**.

## 4 ALIGNERVERZORGING



**GEBRUIK EEN TANDENBORSTEL EN TANDPASTA ZONDER SCHURENDE MATERIALEN** ZOALS ALUMINIUMOXIDE, CALCIUMCARBONAAT OF CALCIUMFOSFAAT (DEZE STOFFEN ZITTEN IN WITMAKENDE TANDPASTA) VOOR DE VERZORGING VAN DE ALIGNERS. WAS ZE ONDER LAUW OF KOUD STROMEND WATER.



SOMMIGE ALIGNERS KUNNEN RUWE RANDEN HEBBEN DOOR HET FABRICAGEPROCES. IN DERGELIJKE GEVALLEN KAN JE ORTHODONTISCHE WAS GEBRUIKEN OF **DE RAND VAN DE ALIGNER VOORZICHTIG GLADMAKEN MET EEN NAGELVIJL.**



STOP ALIGNERS NIET IN JE ZAK EN LEG ZE NIET OP TAFEL, WANT ZE KUNNEN GEMAKKELIJK KWIJTRAKEN OF BREKEN. **BEWAAR ZE IN EEN SPECIALE DOOS** EN UIT DE BUURT VAN HUISDIEREN.

## **5** MOGELIJKE COMPLICATIES

DEZELFDE COMPLICATIES DIE KUNNEN OPTREDEN TIJDENS EEN ORTHODONTISCHE BEHANDELING MET EEN BEUGEL ZIJN OOK MOGELIJK TIJDENS EEN BEHANDELING MET ALIGNERS. DE MEEST VOORKOMENDE COMPLICATIES EN MOGELIJKE COMPLICATIES OP DE LANGE TERMIJN (DIE ENKELE JAREN NA DE BEHANDELING KUNNEN OPTREDEN) ZIJN ONDER ANDERE:

- ⊗ GINGIVALE RECESSIE (TERUGTREKKEND TANDVLEES);
- ⊗ RESORPTIE VAN TANDWORTELS;
- ⊗ GEVOELIGHEID VAN DE TANDEN;
- ⊗ SCHADE AAN TANDGLAZUUR;
- ⊗ WONDEN AAN HET MONDSLIMMVLIES;
- ⊗ MARGINALE BOTDEFECTEN;
- ⊗ GINGIVITIS;
- ⊗ VERERGERING VAN PARODONTITIS;
- ⊗ VERERGERING VAN APICALE PARODONTITIS BIJ ENDODONTISCH BEHANDELDE TANDEN;
- ⊗ PULPITIS VAN GETRAUMATISEERDE TANDEN;
- ⊗ VERERGERING VAN TEMPOROMANDIBULAIRE GEWRICHTSPATHOLOGIE.

IN SOMMIGE GEVALLEN IS HET, DOOR ONVOORZIENE OF ABNORMALE GROEI VAN DE KAAK, NIET MOGELIJK OM DE BEOOGDE CORRECTIE VAN SCHEEFSTAND VAN DE TANDEN EN/OF BEET TE BEREIKEN.

AFHANKELIJK VAN INDIVIDUELE LICHAAMSKENMERKEN KUNNEN ANDERE COMPLICATIES OPTREDEN, MAAR DE KANS DAAROP IS ZEER KLEIN.

## **6** AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BEHANDELINGEN VOOR HET RECHTZETTEN VAN TANDEN

- ⊗ DE BEHANDELING MET ALIGNERS VEREIST JE DISCIPLINE EN VOLLEDIGE MEDEWERKING. HET IS ALLEEN EFFECTIEF ALS JE DE ALIGNERS 22 UUR PER DAG DRAAGT.
- ⊗ VOOR EN/OF TIJDENS DE BEHANDELING KUNNEN ATTACHMENTS VAN TANDKLEURIG VULMATERIAAL OP JE TANDEN WORDEN GEPLAATST.
- ⊗ ALS JE DE ALIGNERS NIET VOLGENS DE INSTRUCTIES DRAAGT, KAN HET GEBEUREN DAT ZE NIET MEER GOED PASSEN EN DAT JE NIEUWE MOET LATEN MAKEN.
- ⊗ RESTAURATIES OP IMPLANTATEN OF JE EIGEN TANDEN MOETEN NA DE BEHANDELING MET ALIGNERS MOGELIJK WORDEN AANGEPAST OF VERVANGEN OMWILLE VAN WIJZIGINGEN IN DE TANDSTAND.
- ⊗ AANVULLENDE HULPMIDDELEN ZOALS INTERMAXILLAIRE ELASTIEKEN, BEUGELS OF ORTHODONTISCHE IMPLANTATEN KUNNEN NODIG ZIJN TIJDENS OF NA DE BEHANDELING.

- 9 MOGELIJK MOET HET BEHANDELPLAN IN DE LOOP VAN DE BEHANDELING WORDEN HERZIEN EN AAN HET EIND KUNNEN AANVULLENDE ALIGNERS NODIG ZIJN OM DE BEHANDELING TE VERFIJNEN EN AF TE RONDEN.
  - 9 NA DE BEHANDELING HEB JE EEN ONDERSTEUNINGSALIGNER NODIG OM 'S NACHTS TE DRAGEN OM TE VOORKOMEN DAT JE TANDEN TERUGSCHUIVEN NAAR HUN OORSPRONKELIJKE POSITIE.
- 

ALS JE VERLIES, BESCHADIGING, VERVORMING VAN DE ORDOLINE-TANDALIGNER OF BESCHADIGING VAN HET MONDSLIJMVLIJS ERVAART, RADEN WE AAN CONTACT OP TE NEMEN MET JE BEHANDELEND TANDARTS OF ZORGSPCIALIST.

HET IS BELANGRIJK OM GEEN BESCHADIGDE RETENTIE-ALIGNERS TE DRAGEN.

NEEM INDIEN NODIG CONTACT OP MET DE FABRIKANT VAN DE ALIGNERS VIA DE CONTACTGEGEVENS IN DE ORDOLINE-INSTRUCTIES.

IN GEVAL VAN EEN ERNSTIG INCIDENT MET BETREKKING TOT HET HULPMIDDEL, DIEN JE DIT TE MELDEN BIJ UAB ORDOLINE EN DE BEVOEGDE AUTORITEIT IN HET LAND WAAR JE GEZONDHEIDSZORG HEBT ONTVANGEN.

---

## 7 UITLEG VAN DE MARKERINGEN OP DE VERPAKKING VAN DE ALIGNER

DE MARKERINGEN OP DE VERPAKKING VAN DE ALIGNERS HELPEN OM DE SPECIFIEKE ALIGNER VOOR ELKE KAAK TE IDENTIFICEREN EN DE VOORTGANG VAN DE BEHANDELING TE VOLGEN. HIER VOLGT DE UITLEG VAN DE MARKERINGEN:

**L 1/16 (L - LOWER):** DEZE MARKERING GEEFT AAN DAT DE ALIGNER ONTWERPEN IS OM OP DE ONDERKAAK TE DRAGEN. HET CIJFER 1 STAAT VOOR DE EERSTE STAP VAN DE IN TOTAAL 16 STAPPEN IN HET BEHANDELPLAN.

**U 1/16 (U - UPPER):** DEZE MARKERING GEEFT AAN DAT DE ALIGNER ONTWERPEN IS OM OP DE BOVENKAAK TE DRAGEN. HET CIJFER 1 STAAT EVENEENS VOOR DE EERSTE STAP VAN DE IN TOTAAL 16 STAPPEN IN HET BEHANDELPLAN.

**INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERBARE  
ORTHODONTISCHE ALIGNERS  
VAN ORDOLINE IN ANDERE TALEN VIND JE  
DOOR DE QR-CODE TE VOLGEN.**





## MEDEDELING OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBECHERMING (HIERNA: AVG), INFORMEREN WIJ JE DAT UAB ORDOLINE, LEGAL ENTITY CODE: 305610551; ADRES: A. VIVULSKIO STR. 7-202, VILNIUS, LITOUWEN, IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS. WE PUBLICEREN ALLE INFORMATIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE AVG MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OP DE WEBSITE VAN ORDOLINE [HTTPS://ORDOLINE.COM/PATIENT-PRIVACY-POLICY/](https://ordoline.com/patient-privacy-policy/)

Datum van herziening van de instructie: 2023-08-10

**LLC Ordoline**  
A. Vivulskio str. 7-202  
LT-03162 Vilnius, Litouwen