

ORDOLINE

Instrukcija
retencinēms
kapoms

LT



Sveikiname pabaigus gydymą Ordoline kapomis! Kartu pasiekėme puikių rezultatų!


Svarbu žinoti, kad žmogaus dantys nuolat juda, todėl baigus gydymą dantis būtina užfiksuoti taisyklingoje padėtyje retencinių kapų pagalba. Jas rasite šiame siuntinyje ir tikime, jog atsakingai jas nešiosite stabilaus gydymo rezultato užtikrinimui.

Geriausiam rezultatui užtikrinti retencines kapas rekomenduojame nešioti šiuo dažnumu:



Naudojimo rekomendacijos

Kapas **užsidėkite** nuo priekinių dantų.

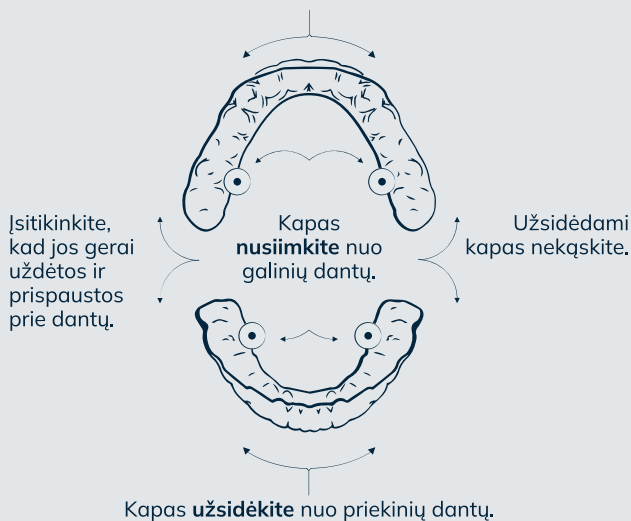

Retencinių kapų priežiūra

Retencinių kapų priežiūrai naudokite šepetėlį ir dantų pastą, neturinčią abrazyvų medžiagų, tokių kaip aliuminio oksidas, kalcio karbonatas, kalcio fosfatas (šių medžiagų yra balinamojoje dantų pastoje). Kapas plaukite po tekančiu drungnu arba šaltu vandeniu.

! Atkreipiame dėmesį, kad retencinės kapos nėra bruksizmo/ nevalingo dantų griežimo kapos. Jei griežiate dantimis, būtinai tai paminėkite savo gydytojui ir jums bus pritaikytas individualus gydymas.

Burnos priežiūra

Dantis valykite kaip ir įprastai – dantų šepetėliu su pasta, naudokite tarpdančių siūlą.

Retencinės kapos pametus, sugadinus, deformavus ar esant burnos gleivinės pažeidimui, rekomenduojame kreiptis į savo gydytoją/sveikatos priežiūros specialistą.

Svarbu nenešioti sugadintų retencinių kapų.

Esant poreikiui, rekomenduojame kreiptis į kapų gamintoją – Ordoline.

Apie su priemone susijusį rimtą incidentą praneškite UAB „Ordoline“ ir šalies, kurioje jums suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kompetentingai institucijai.

Norime paskatinti Jus dalintis gerąja savo gydymo patirtimi tokiu būdu įkvėpsite ir padėsite kitiems pasiryžti gydymui Ordoline kapomis (tai galite padaryti savo socialiniuose tinkluose su @Ordoline žyme).



Skenuokite QR kodą ir
palikite atsiliepimą.



Instrukcijas retencinėmis kapomis
kitomis kalbomis galite rasti nuskaičius
QR kodą.

ORDOLINE

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 14 straipsnį informuojame, kad UAB Ordoline, juridinio asmens kodas: 305610551; adresas: A. Vivulskio g. 7-200, Vilnius, Lietuva yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Visa BDAR 14 straipsnyje numatyta informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra skelbiama Ordoline internetinėje svetainėje <https://ordoline.com/lt/privacy-policy/>

Instrukcijos redakcijos data: 10.07.2025

Ordoline
A. Vivulskio g. 7-200
LT-03162 Vilnius, Lietuva
www.ordoline.com

