

ORDOLINE

Noturošo kapju
lietošanas
pamācība

LV



Apsveicam, jūs pabeidzāt ārstēšanu ar Ordoline kapēm! Kopā mēs sasniedzām lieliskus rezultātus!

Ir svarīgi apzināties, ka pēc zobu taisnošanas zobi ir jānotur iegūtajā pozīcijā. Tas ir iespējams ar reteineru jeb noturošo kapju palīdzību, kas atrodas šajā iepakojumā. Aicinām tās valkāt apzinīgi, lai nodrošinātu nemainīgu un stabilu ārstēšanas rezultātu.

Noturošo kapju ieteicamais lietošanas laiks:




Lietošanas ieteikumi

Kapes ir **jāievieto**, sākot no priekšējiem zobiem.

Nesakodiet zobus, kad ievieņojat kapes.

Izņemiet kapes, sākot no aizmugurējo zobu iekšpusēs.

Pārliecinieties, ka kapes labi pieguļ jūsu zobiem.

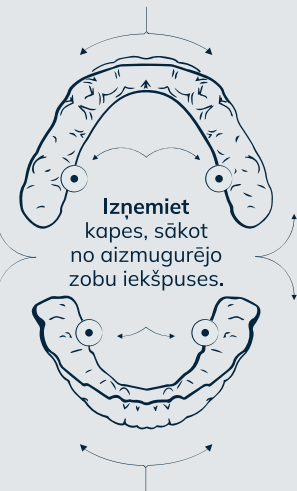

Ievieņojiet kapes, sākot no priekšējiem zobiem.

Noturošo kapju apkope

Kapju tīrīšanai izmantojiet zobu birsti un zobu pastu, kas nesatur abrazīvas vielas, piemēram, alumīnija oksīdu, kalcija karbonātu, kalcija fosfātu (šīs vielas atrodas balinošās zobu pastās). Noskalojiet tekošā remdenā vai aukstā ūdenī.

! Lūdzu, ņemiet vērā, ka ortodontiskās kapes nav paredzētas bruksismam vai neapzinātai zobu griešanai. Ja jūs griežat zobus, noteikti informējiet savu ārstu, lai varētu sagatavot individuālu ārstēšanas plānu.

Mutes dobuma kopšana

Tīriet zobus, kā ierasts – izmantojiet zobu birsti un zobu pastu, kā arī zobu diegu. Ja kapes tiek pazaudētas, bojātas, deformētas vai tiek bojāta mutes gļotāda, iesakām sazināties ar jūsu ārstu / veselības aprūpes speciālistu.

Bojātas kapes nevajadzētu izmantot. Ja nepieciešams, sazinieties ar kapju ražotāju Ordoline.

Par nopietniem ar kapēm saistītiem negadījumiem ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

Aicinām jūs dalīties savā labajā pieredzē, lai iedvesmotu arī citus izvēlēties zobu taisnošanu ar Ordoline kapēm (sociālajos tīklos aicinām izmantot @Ordoline).

Veselīgs un skaists smaids var pozitīvi izmainīt dzīvi! Palīdzēsim visiem to atklāt!



Skenē QR kodu, lai
atstātu savu atsauksmi.



Norādījumus par Ordoline
noturošajām kapēm citās valodās
var atrast, izmantojot QR kodu.

ORDOLINE

Paziņojums par personas datu apstrādi

Saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VДАР) 14. pantu mēs jūs informējam par to, ka UAB Ordoline, juridiskās personas identifikācijas kods: 305610551; adrese: A. Vivulskio 7-200, Viļņa, Lietuva, ir jūsu personas datu apstrādātājs. Visa VДАР 14. pantā pieprasītā informācija par jūsu personas datu apstrādi ir publicēta Ordoline tīmekļvietnē <https://ordoline.com/lv/privacy-policy/>

Pamācības labojuma datums: 20.07.2025

Ordoline
A. Vivulskio 7-200
LT-03162 Viļņa, Lietuva
www.ordoline.com

