


ORDOLINE

Инструкция к
ретенционным
элайнерам

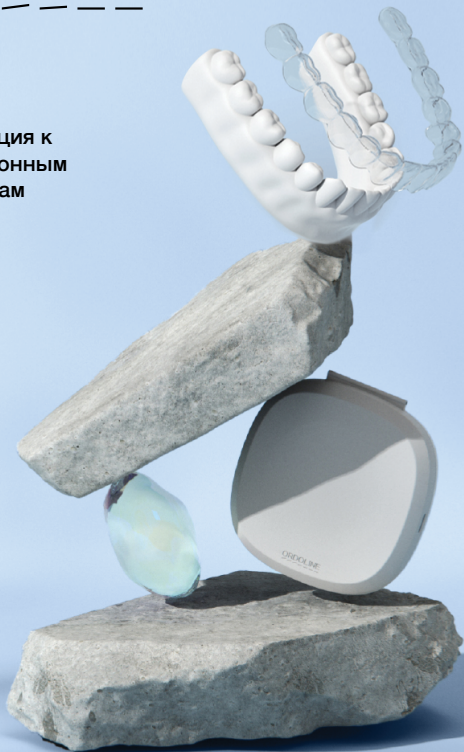

Поздравляем с успешным завершением вашего путешествия с элайнерами «Ordoline»!
Вместе мы достигли потрясающих результатов!

Важно знать, что зубы постоянно находятся в движении, поэтому после лечения необходимо их зафиксировать в правильном положении с помощью ретенционных элайнеров. Вы найдете их в этой упаковке, и мы верим, что будете носить их с ответственностью, чтобы сохранить долговременно результат лечения.

Чтобы достичь наилучшего результата, рекомендуется носить ретенционные элайнеры согласно следующему плану:

0 - 4
месяца



22 часа в
сутки

4 - 24
месяца



Каждую
ночь

Через 24
месяца



1 ночь в
неделю

Рекомендации по пользованию

- Начинайте надевать элайнеры с передних зубов и заканчивайте задними молярами.
- Снимайте элайнеры, начиная с задних моляров и заканчивая передними зубами.

Уход за ретенционными элайнерами

Для ухода за ретенционными элайнерами используйте мягкую зубную щетку и зубную пасту без абразивных веществ, таких как оксид алюминия, карбонат кальция или фосфат кальция (эти вещества содержатся в отбеливающей зубной пасте). Промывайте элайнеры под проточной водой комнатной температуры или под холодной водой.

Уход за полостью рта

Продолжайте ухаживать за полостью рта как обычно - чистя зубы с зубной пастой и используя зубную нить. В случае утраты, повреждения, деформации или повреждения слизистой оболочки полости рта рекомендуем обратиться к вашему лечащему врачу или медицинскому специалисту. Важно - не носить испорченные, повреждённые ретенционные элайнеры. При необходимости, рекомендуем обратиться к производителю элайнеров – «Ordoline».

В случае возникновения опасного инцидента в отношении приспособления, просим вас незамедлительно сообщить об этом ЗАО «Ordoline» и компетентному органу здравоохранения вашей страны.



Уведомление об обработке персональных данных

Согласно статье 14 Общего регламента по защите данных (GDPR), мы хотим уведомить вас о том, что юридическое лицо ЗАО «Ordoline», код: 305610551; адрес: ул. А. Вивульскио 7-202, Вильнюс, Литва, является ответственным за обработку ваших персональных данных. Вся информация, касающаяся обработки ваших персональных данных в соответствии со статьей 14 GDPR, доступна на веб-сайте «Ordoline».

<https://ordoline.com/политика-конфиденциальности-для-пациентов/>

Дата редакции инструкции: 10.08.2023

ЗАО «Ordoline»
ул. А. Вивульскио 7-202
LT-03162 Вильнюс, Литва