


ORDOLINE

Інструкції для знімних
ортодонтичних елайнерів



UK

1 Рекомендації щодо використання

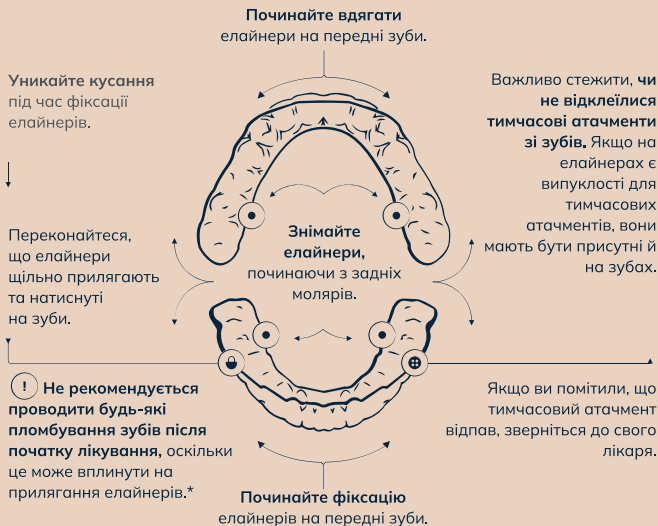

Щоб досягти найкращих результатів, важливо носити елайнери ordoline цілодобово, з **оптимальним часом носіння 22 години.**

Змінюйте набір елайнерів кожні 10 днів, якщо інше не рекомендовано вашим лікарем.

Ми рекомендуємо зберігати використані елайнери у пакеті, зазначаючи дату їх фіксації, та брати їх із собою на наступний прийом до вашого стоматолога.

Рекомендується **надягати новий набір елайнерів перед сном**, щоб вони могли адаптуватися протягом ночі без зняття щонайменше на 8 годин.

*У разі невідкладного лікування обов'язково повідомте лікаря, який веде ваше ортодонтичне лікування.

2 Догляд за ротовою порожниною



Чистьте зуби, як звичайно, щіткою та зубною пастою.
Використовуйте зубну нитку для ретельного очищення.



Після прийому їжі та перекусів рекомендується очищати зуби зубною щіткою та пастою. Якщо це неможливо, можна використовувати жувальну гумку, промивати рот водою або застосовувати ополіскувач.



У перші тижні лікування **слизова оболонка може стати чутливою** або покритися виразками через кнопки на зубах. У таких випадках **можна промивати ротову порожнину теплим розчином солі** (1 чайна ложка солі на склянку води) або **слабким антисептичним розчином**.

3 Догляд за елайнерами



Використовуйте зубну щітку та пасту без абразивних речовин, таких як оксид алюмінію, карбонат кальцію або фосфат кальцію (ці речовини містяться у відбілюючій зубній пасті), для догляду за елайнерами. Промивайте їх під теплою або холодною проточною водою.



Деякі елайнери можуть мати шерховаті краї внаслідок технологічного процесу виробництва. У таких випадках можна використовувати ортодонтичний віск або обережно зашліфувати край елайнера пилочкою для нігтів.



Не кладіть елайнери в кишеню або на стіл, оскільки їх легко втратити чи пошкодити. **Зберігайте їх у спеціальному футлярі** та подальші від домашніх тварин.

4 Під час лікування

Заборонено їсти. Можна пити лише холодну воду.

Уникайте вживання гарячих напоїв та миття елайнерів під гарячою водою, оскільки це може спричинити зміну їх форми.

Не жуйте жувальну гумку під час використання елайнерів.

Не рекомендується курити з елайнерами, оскільки це може змінити їх колір та еластичність.

5 Можливі ускладнення

Ті самі ускладнення, що можуть виникати під час ортодонтичного лікування брекетами, можливі й під час лікування елайнерами. Найпоширеніші ускладнення та потенційні довгострокові ускладнення (ускладнення, що можуть виникнути через кілька років після лікування) включають:

- 9 Рецесія ясен (оголення коренів зубів);
- 9 Резорбція коренів зубів;
- 9 Чутливість зубів;
- 9 Пошкодження емалі зубів;
- 9 Рани слизової оболонки ротової порожнини;
- 9 Дефекти крайової кістки;
- 9 Гінгівіт;
- 9 Загострення пародонтального захворювання;
- 9 Загострення апікального періодонтиту в лікованих ендодонтично зубах;
- 9 Пульпіт травмованого зуба;
- 9 Загострення патології скронево-нижньощелепного суглоба.

У деяких випадках, через непередбачене або абнормальне зростання щелеп, може виявитися неможливість досягнення запланованої корекції неправильного розташування зубів або прикусу.

В залежності від індивідуальних особливостей організму, можуть виникати інші ускладнення, проте ймовірність їх виникнення дуже низька.

6 Додаткові застереження та запобіжні заходи для лікування вирівнювання зубів

- 9 Лікування елайнерами вимагає дисципліни та повної співпраці. Воно буде ефективним тільки у разі носіння елайнерів по 22 години на добу.
- 9 Перед та/або під час лікування на зуби можуть бути встановлені тимчасові атачменти з матеріалу кольору зуба.
- 9 Якщо ви не дотримуетесь інструкцій щодо носіння елайнерів, вони можуть перестати щільно прилягати, і вам може знадобитися виготовлення нових.
- 9 Реставрації на імплантах або власних зубах можуть потребувати корекції або заміни після лікування елайнерами через зміну положення зубів.
- 9 Додаткові пристрої, такі як міжщелепні еластики, брекети або ортодонтичні імпланти, можуть бути необхідні під час або після лікування.

- 9 У процесі лікування може виникнути необхідність корегування плану лікування, а в кінці можуть знадобитися додаткові елайнери для уточнення та завершення лікування.
- 9 Після лікування вам знадобиться підтримуючий елайнер для носіння вночі, щоб запобігти поверненню зубів у початкове положення.

! Зверніть увагу, що ортодонтичні капи не призначені для лікування бруксизму або мимовільного скреготіння зубами. Якщо ви скрежете зубами, обов'язково повідомте про це свого лікаря, щоб вам могли надати індивідуальний план лікування.

Якщо ви втратили, пошкодили, деформували елайнер Ordoline або отримали пошкодження слизової оболонки рота, ми рекомендуємо звернутися до вашого лікуючого стоматолога або медичного фахівця.

Важливо не носити пошкоджені ретенційні елайнери.

У разі необхідності звертайтеся до виробника елайнерів, використовуючи контактну інформацію, вказану в інструкціях до Ordoline.

У разі серйозного інциденту, пов'язаного з пристроєм, повідомте про це ТОВ «Ordoline» та уповноважений орган у країні, де ви отримали медичні послуги.

7 Пояснення позначень на упаковці елайнерів

Позначення на упаковці елайнерів допомагають ідентифікувати конкретний елайнер для кожної щелепи та відстежувати прогрес лікування. Ось пояснення позначень:

L 1/20 (L - Lower) – це позначення вказує, що елайнер призначений для нижньої щелепи. Число 1 означає перший етап із загальної кількості 20 етапів у плані лікування.

U 1/20 (U - Upper) – це позначення вказує, що елайнер призначений для верхньої щелепи. Аналогічно, число 1 означає перший етап із загальної кількості 20 етапів у плані лікування.



Інструкції для знімних ортодонтичних елайнерів Ordoline іншими мовами можна знайти, сканувавши qr-код.



Скануйте QR-код, щоб залишити свій відгук.



Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до статті 14 загального регламенту захисту даних (далі – GDPR), повідомляємо, що контролером ваших персональних даних є

ТОВ «Ordoline», код юридичної особи: 305610551; адреса:

Вул. А. Вівульськю 7-200, Вільнюс, Литва. Вся інформація, передбачена статтею 14 GDPR щодо обробки ваших персональних даних, опублікована на веб-сайті

Ordoline за посиланням: <https://ordoline.com/uk/privacy-policy/>

Дата перегляду інструкції: 10.07.2025

Ordoline

Вул. А. Вівульського, 7-200
LT-03162 Вільнюс, Литва

www.ordoline.com